



## Autoclaves eléctricos para esterilización "MICRO 8", "MED 12", y "MED 20"

REGULACIÓN POR PRESOSTATO A 1 Y 2 bar. PARA TEMPERATURAS A 121 °C Y 134 °C.  
MODELOS VERTICAL DE SOBREMESA "MICRO 8" CAPACIDAD: 8 LITROS. Y "MED 12" CAPACIDAD: 12 LITROS.  
MODELO VERTICAL DE PIE "MED 20" CAPACIDAD: 20 LITROS.

### Una alternativa económica. Semiautomáticos.

#### SEGURIDAD:

**VÁLVULA DE SEGURIDAD:** PREVIENE QUE LA PRESIÓN SOBREPASE EL LÍMITE MÁXIMO.  
**PRESOSTATO DE SEGURIDAD:** DESCONECTA LOS CALEFACTORES EN CASO DE SOBREPASAR EL LÍMITE DE PRESIÓN.  
**TERMOSTATO DE SEGURIDAD:** DESCONECTA LA CALEFACCIÓN EN CASO DE SOBRETENPERATURA O FALTA DE AGUA EN EL DEPÓSITO.  
**ENVOLVENTE EN TERMOPLÁSTICO MOLDEADO PARA PROTECCIÓN TÉRMICA DE LA TAPA.**

#### CARACTERÍSTICAS COMUNES

Mueble exterior y encimera en acero inox. AISI 304.  
Depósito y tapa en acero inox. de fácil apertura.  
Elemento calefactor en acero inox. especial INCOLOY de gran duración, resistente a la corrosión y a la alta temperatura.  
Evacuación manual del aire a la puesta en marcha. (modelo "MICRO 8").  
Purgado atmosférico automático. (modelos "MED 12" y "MED 20").  
Cierre simple y seguro, con dispositivo de seguridad de la apertura de la tapa.  
Interruptor general de puesta en marcha.



#### PARTE POSTERIOR


Toma de red eléctrica.  
Dos portafusibles.  
Termostato de seguridad.



#### PARTE LATERAL

Salida desagüe.  
Valvula selectora de vapor y drenaje.

#### PANEL DE MANDOS

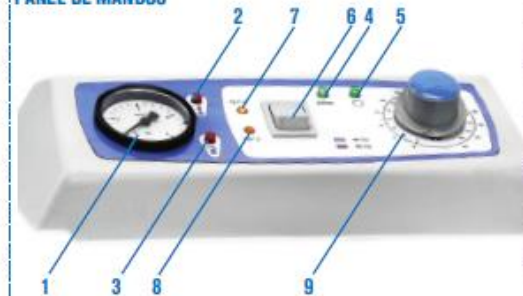

1. Manómetro.
2. Indicador luminoso de alarma de sobre-temperatura.
3. Indicador luminoso de puerta abierta.
4. Indicador luminoso de fase esterilización.
5. Indicador luminoso de final de ciclo de esterilización.
6. Selector de temperatura 121 °C ó 134 °C.
7. Indicador luminoso a 121 °C.
8. Indicador luminoso a 134 °C.
9. Temporizador de 0 a 60'.



## Autoclave eléctrico para esterilización "MICRO 8"

MODELO DE SOBREMESA.



#### MODELO

Código	Capacidad litros	Ø (útil) cm	Alto cm	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Consumo W	Peso Kg
<b>4001745</b>	8	24	15	40 38 38	1000	13

Se suministra con un cestillo de alambre en acero inox. de Ø 22 x 14 cm alto. Cód. 1004771



### Autoclave eléctrico para esterilización "MED 12"

MODELO DE SOBREMESA.

Características: Ver pág. 84



#### MODELO

Código	Capacidad litros	Ø (útiles) cm	Alto (útiles) cm	Alto /Ancho / Fondo (exterior) cm	Consumo W	Peso Kg
4001756	12	24	26	46 38 38	1800	18

Se suministra con un cestillo de alambre en acero inox. de Ø 22 x 24 cm alto. Cód. 1004772



### Autoclave eléctrico para esterilización "MED 20"

MODELO DE PIE.

CONFORME A LAS DIRECTIVAS DE APARATOS DE PRESIÓN.

Características: Ver pág. 84



#### MODELO

Código	Capacidad litros	Ø (útiles) cm	Alto (útiles) cm	Alto /Ancho / Fondo (exterior) cm	Consumo W	Peso Kg
4001757	20	24	41	70 38 38	2500	41

Se suministra con dos cestillos de alambre en acero inox. de Ø 23 x 17 código 1004773