




TRITURADORA DE MANDÍBULAS BB 100

Unidad básica para aplicaciones estándar

La trituradora de mandíbulas BB 100 es la unidad vertical más pequeña de la serie. Admite granulometrías iniciales de hasta 50 mm. La anchura de la abertura puede ajustarse continuamente de 0 a 20 mm. Dependiendo del material de la muestra, se pueden obtener granulometrías finales de hasta 4 mm, lo que supone una relación de trituración del 12,5.

Éstas se ofrecen en 8 modelos. Su rendimiento y la granulometría final alcanzada varían en función del modelo, de la abertura de salida ajustada y de las propiedades de fractura del material.

Construcción robusta, fácil uso y fácil limpieza son algunas de las prestaciones de las trituradoras RETSCH. Estas máquinas pueden trabajar en régimen de operación por lotes con pequeñas cantidades de muestra, o bien con grandes cantidades en régimen de operación continuo.

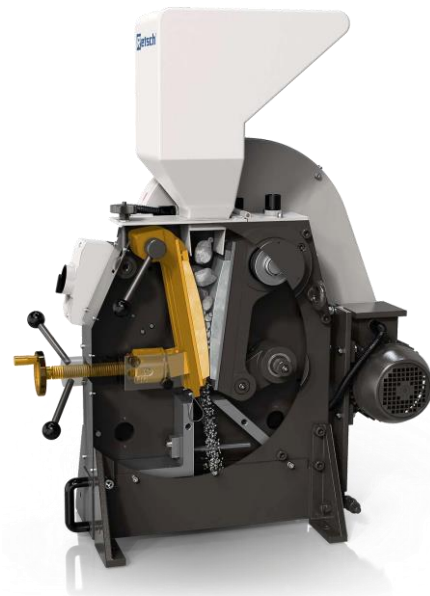

ROBUSTA Y VERSÁTIL

- | Alto grado de trituración
- | Amplia selección de materiales que permite la preparación de muestras para cualquier tipo de análisis
- | Compensación del desgaste por ajuste del punto cero
- | Ajuste continuo de la abertura de salida
- | Fácil limpieza de la cámara de trituración
- | Trituración continua posible
- | Conexión para aspiradora



Unidad básica para aplicaciones estándar

TRITURADORA DE MANDÍBULAS BB 100

SUPERIORIDAD EN TODOS LOS DETALLES

TRITURADORA DE MANDÍBULAS BB 100

DATOS TÉCNICOS

Aplicación	trituration previa y gruesa
Campos de aplicación	geología / metalurgia, ingeniería / electrónica, materiales de construcción, medio ambiente / reciclaje, química / plásticos, vidrio / cerámica
Tipo de material	semiduro, duro, frágil, tenaz
Principio de molienda	Presión ejercida en la muestra
Granulometría inicial*	< 50 mm
Granulometría final*	< 4 mm
Rendimiento*	200 kg/h
Material de las herramientas de molienda	acero al manganeso, acero inoxidable, carburo de tungsteno, acero 1.1750 (para molienda libre de metales pesados)
Abertura de boca	60 x 60 mm
Ajuste abertura de salida	0 - 20 mm
Indicador de la abertura de salida	escala
Ajuste del cero	sí
Tolva abatible	sí
Conexión de aspiradora	sí
Lubricación central	-
Suministrable como versión para montaje	-
Recipiente colector	2 l
Motor	motor monofásico / motor trifásico
Potencia motriz	0,75 kW
Conexión eléctrica	voltajes diferentes
Alimentación de red	monofásico / trifásico
Tipo de protección	IP 54
A x H x F cerrado	320 x 960 x 800 mm
Peso neto	~ 137 kg
Normas	CE

*Dependiendo del material introducido y de la configuración/ajuste del equipo